


輸出 Excel 或 TXT 的量測檔案


Q: 我如何把量測裡的資訊輸出成 Excel 或 txt 的檔案?

A: 首先，請到工具中選擇量測資訊。

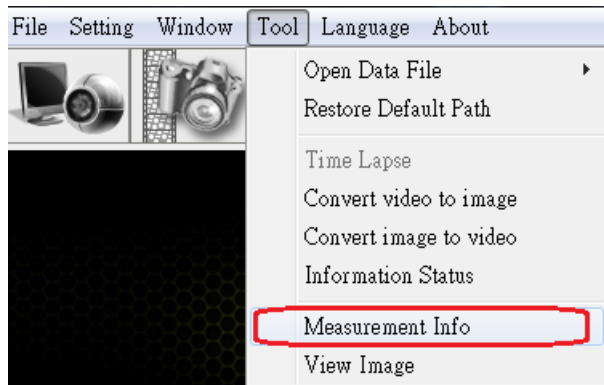

點選”儲存量測資訊”

並點選您希望輸出的檔案類型，例如 txt, xls 或 xlsx 檔案。

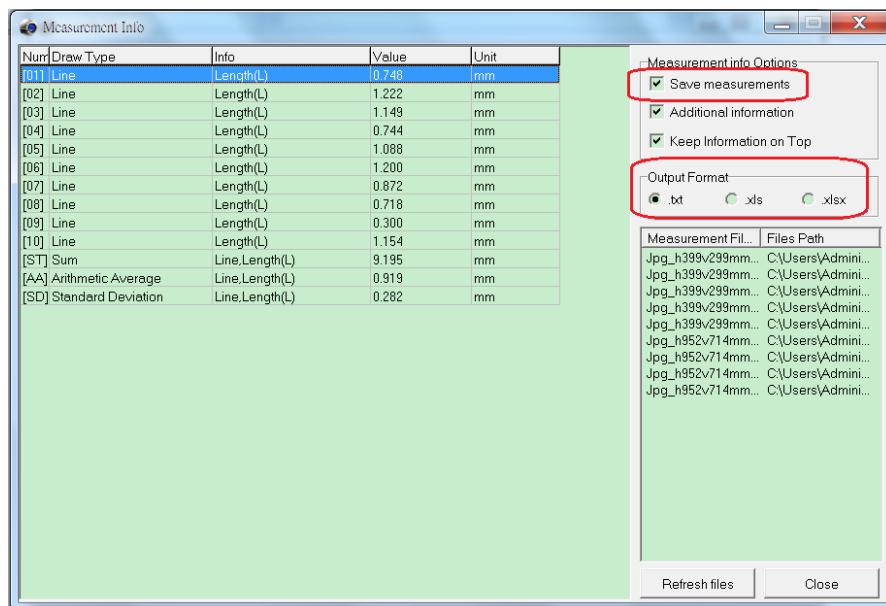


第二，使用量測功能

第三，開始進行量測，您會看到所量測的每一個資訊前面都會有標註 例如: (No 1 C:0.2mm, No2 C:0.25mm)

第四，儲存所量測的資訊，請點選以下磁碟片的圖示，儲存照片及檔案兩種。



檔案儲存後，請回到”量測資訊”裡，在您想選擇檔案上點右鍵，可以選擇同時打開照片及檔案。剛剛所儲存的照片(含量測) 及量測資訊檔案便會跳出。

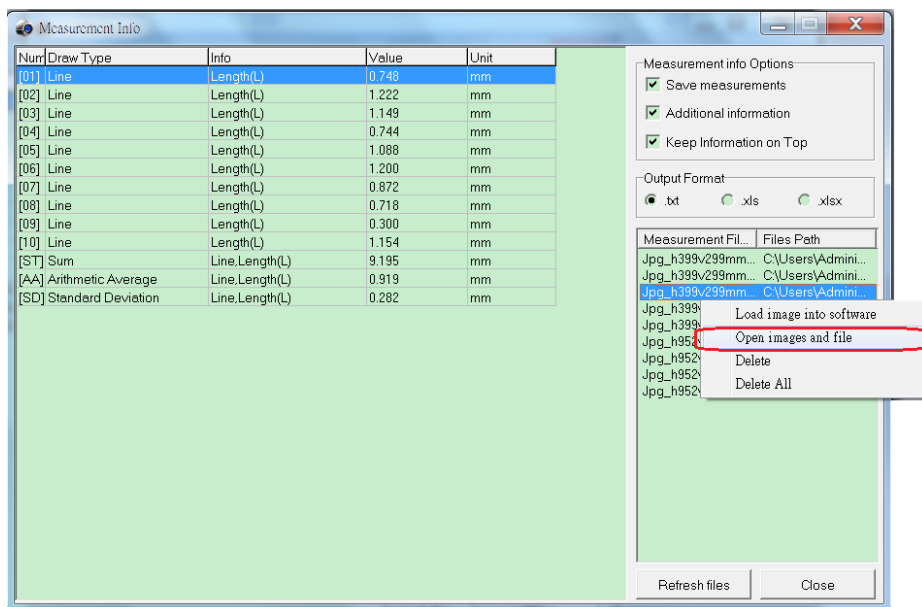

備註: 1) 儲存的檔案類型請在開始量測前先選取，一旦選取後，則會輸出該種檔案。

備註: 2) 當點選輸出規格的選項時，下圖中的列表只會顯示該種類的檔案，若您儲存的檔案為三種不同類型，請點選檔案類型預覽。