



UMViewer Installation Manual

Automatic Installation


Select UMViewer_Installer.exe

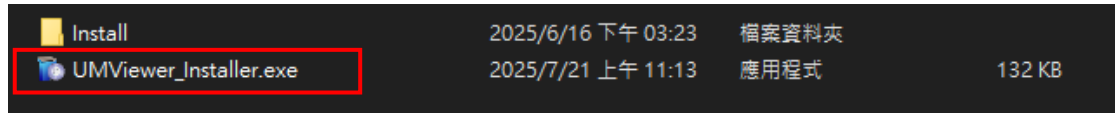



Right click and Install UMViewer by Administrator right _Installer.exe

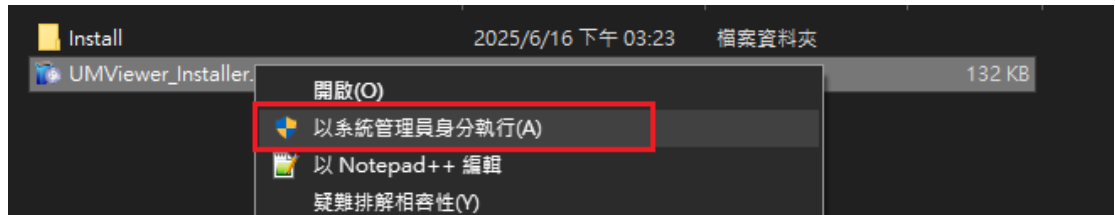


- If it is not selected by administrator right, it will show below message.

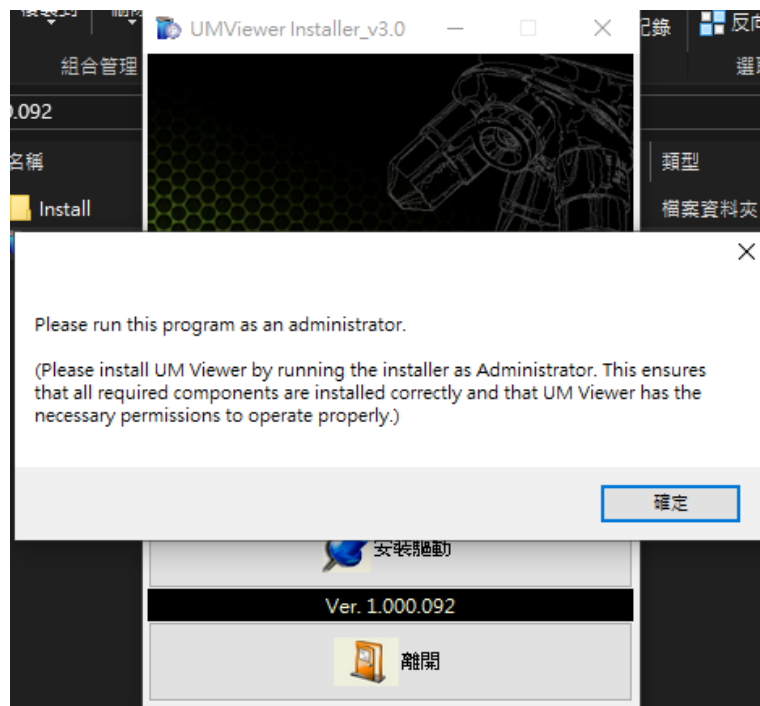

A. Click Install Driver

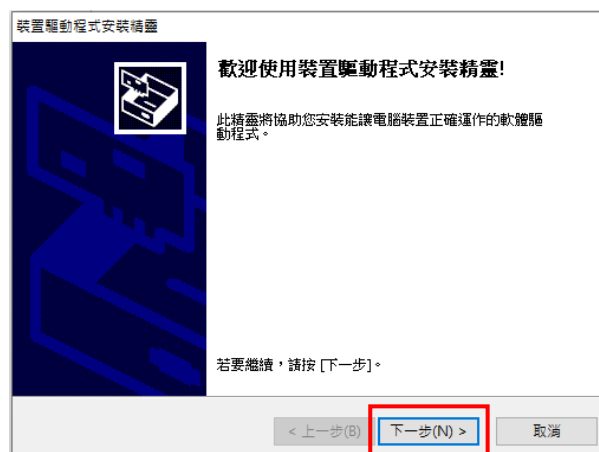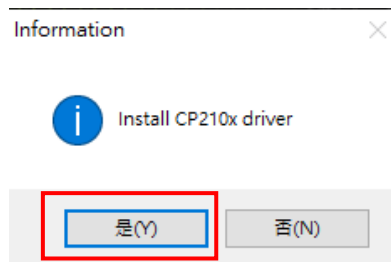

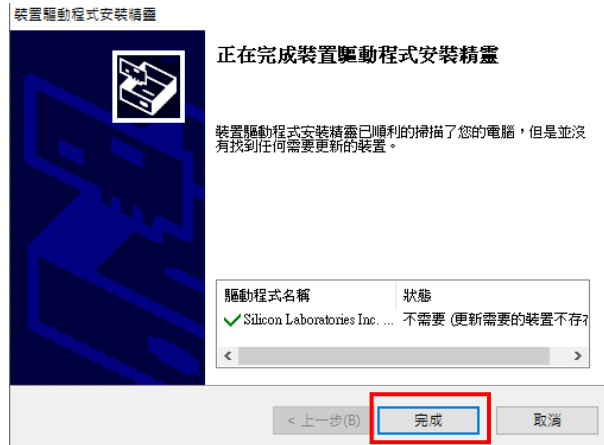


If the installation fails, it means the system drive is locked. Please have IT personnel unlock it & try it again.

B. Click Install Software




- **Auto detect computer if there is necessary Microsoft Redistributable Package or not. If none, it will remind to install it.**


1. Package (1)

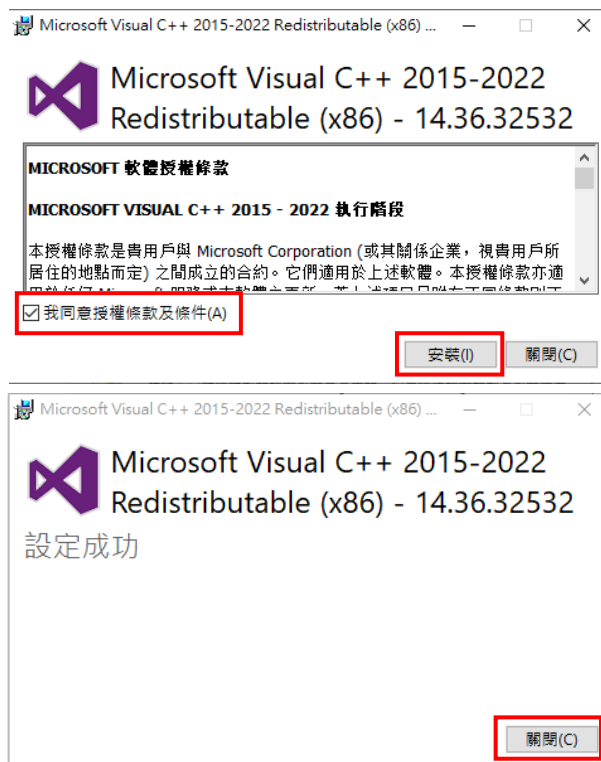



Remarks : If the installation fails, please check whether another version is already installed. If so, please close the message and ignore the failure message.


2. Package (2)

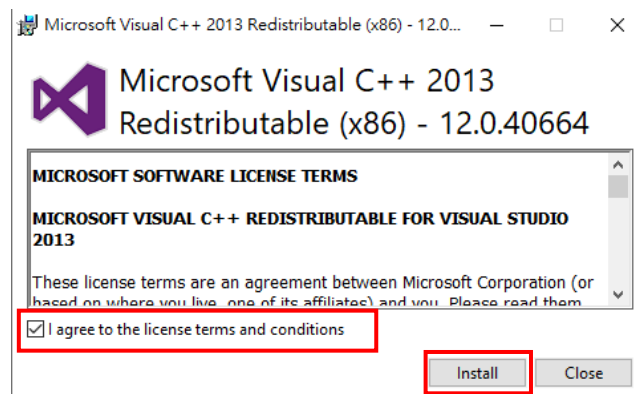

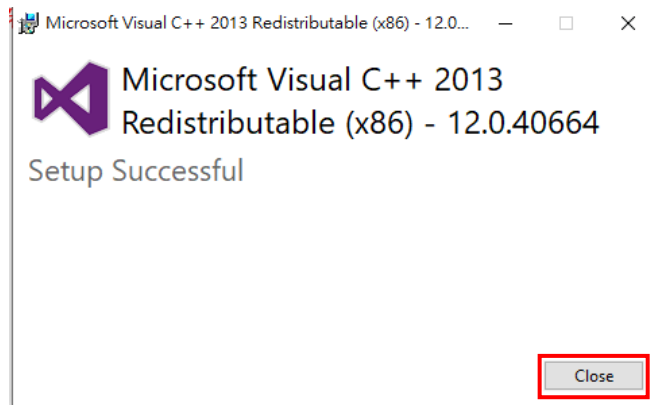

Remarks : If the installation fails, please check whether another version is already installed. If so, please close the message and ignore the failure message.

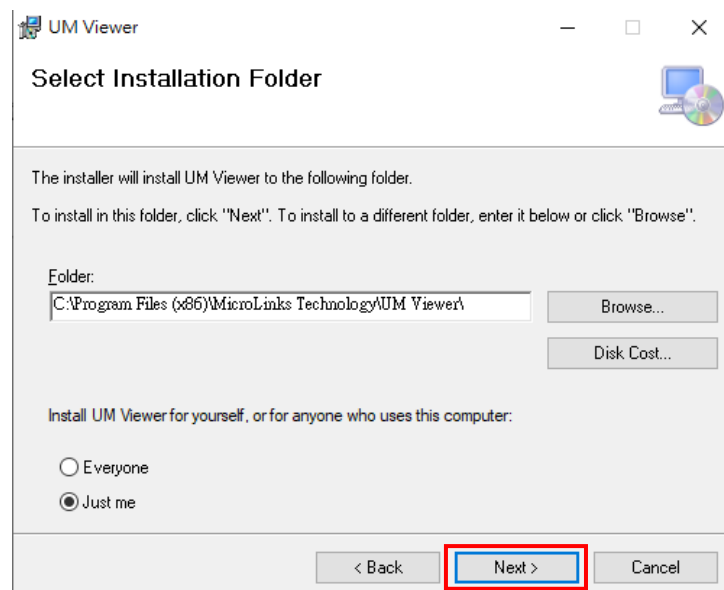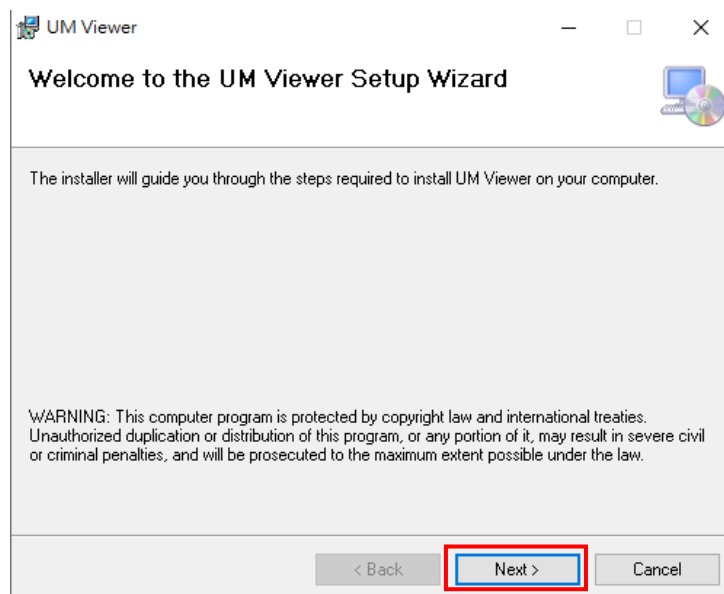

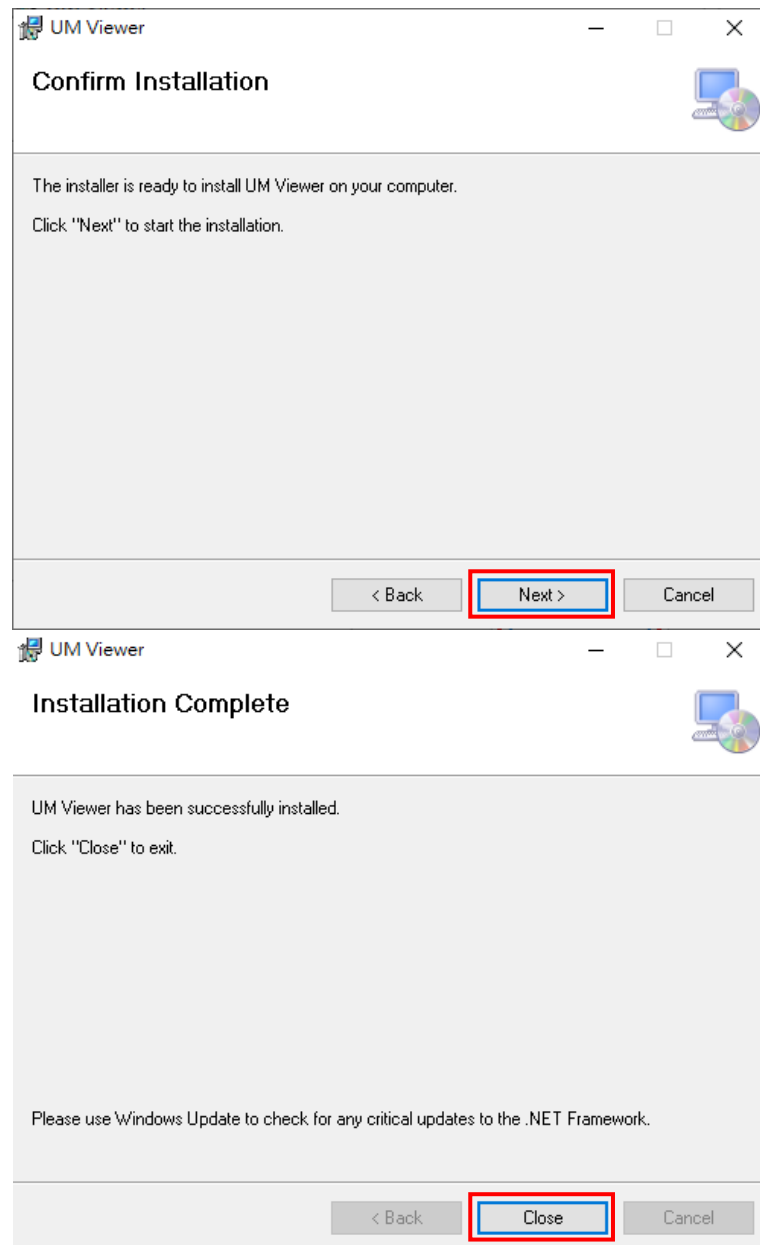

Installation Finished

Manual Installation

If automatic installation fails, please use manual installation instead.

➤ Click the **Install** Folder

 Install	2025/6/16 下午 03:23	檔案資料夾	
 UMViewer_Installer.exe	2025/7/21 上午 11:13	應用程式	132 KB

First, install the driver by clicking the **Driver** folder.

名稱	修改日期	類型	大小
 DotNetFX452	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
 Driver	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
 vcredist_x86	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
 Application.msi	2025/6/16 下午 03:19	Windows Install...	41,284 KB
 setup.exe	2025/6/16 下午 03:19	應用程式	795 KB
 VC_redist.x64.exe	2023/6/9 下午 05:08	應用程式	24,762 KB

For **Windows 10** or **Windows 11**, click

 10_

For older operating systems such as **Windows 7** or **Windows 8**, click

 _10

名稱	修改日期	類型	大小
 _10	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
 10_	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	

Click **CP210x_VCP_Windows**

名稱	修改日期	類型	大小
 CP210x_VCP_Windows	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	

If your operating system is **64-bit**, click

 CP210xVCPInstaller_x64.exe

If your operating system is **32-bit**, click

 CP210xVCPInstaller_x86.exe

名稱	修改日期	類型	大小
 arm	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
 arm64	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
 x64	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
 x86	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
 CP210x_Universal_Windows_Driver.zip	2022/3/23 上午 11:48	WinRAR ZIP 壓縮檔	266 KB
 CP210x_Universal_Windows_Driver_Rel...	2022/3/22 上午 11:37	文字文件	27 KB
 CP210xVCPInstaller_x64.exe	2018/5/7 下午 05:05	應用程式	1,026 KB
 CP210xVCPInstaller_x86.exe	2018/5/7 下午 05:05	應用程式	903 KB
 dpinst.xml	2018/5/7 下午 04:46	Microsoft Edge ...	12 KB
 silabser.cat	2022/3/16 下午 09:20	安全性目錄	14 KB
 silabser.inf	2022/3/16 下午 09:11	安裝資訊	11 KB
 SLAB_License_Agreement_VCP_Windo...	2021/4/16 下午 03:32	文字文件	9 KB




Remarks : If the installation fails, please check whether another version is already installed. If so, please close the message and ignore the failure message.

To install the forwarding package, click **vcredist_x86**

名稱	修改日期	類型	大小
DotNetFX452	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
Driver	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
vcredist_x86	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
Application.msi	2025/6/16 下午 03:19	Windows Install...	41,284 KB
setup.exe	2025/6/16 下午 03:19	應用程式	795 KB
VC_redist.x64.exe	2023/6/9 下午 05:08	應用程式	24,762 KB

1. First to select




名稱	修改日期	類型	大小
VC_redist.x86.exe	2023/6/8 上午 09:44	應用程式	13,514 KB
vcredist_x86_2013.exe	2024/3/28 上午 11:38	應用程式	6,358 KB

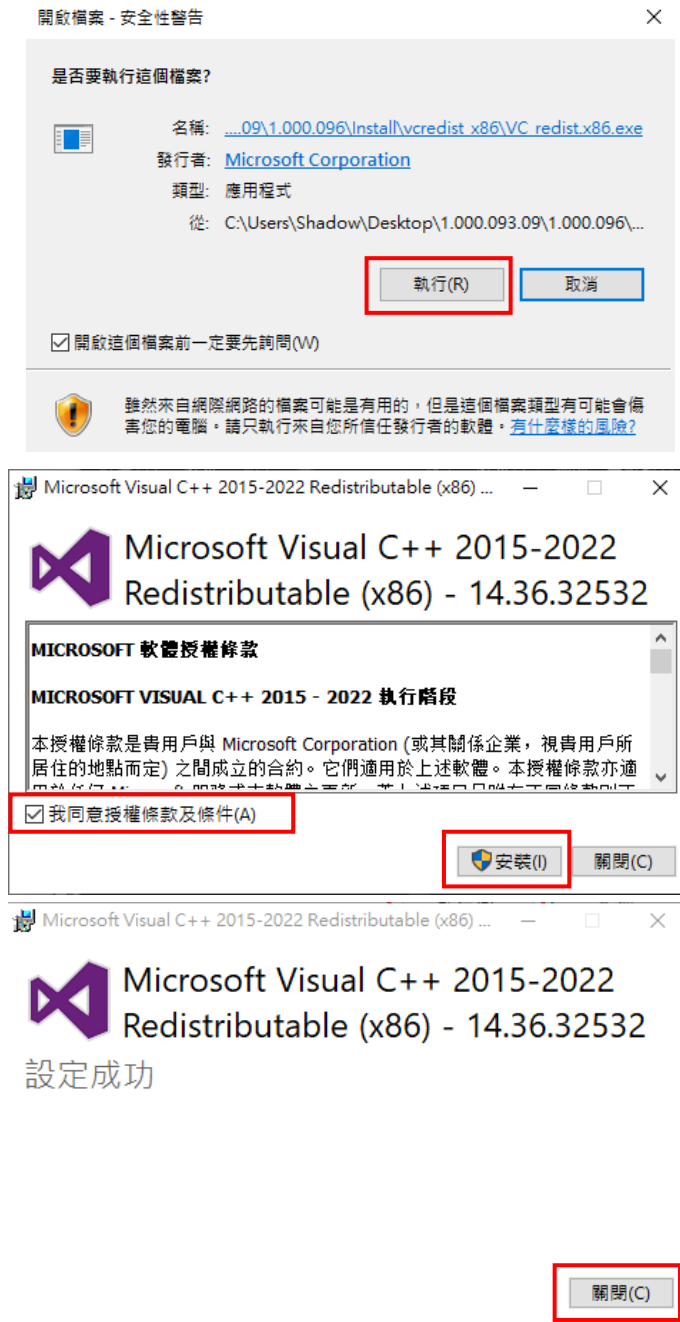

Remarks : If the installation fails, please check whether another version is already installed. If so, please close the message and ignore the failure message.

2. Then, select



VC_redist.x86.exe	2023/6/8 上午 09:44	應用程式	13,514 KB
vcredist_x86_2013.exe	2024/3/28 上午 11:38	應用程式	6,358 KB

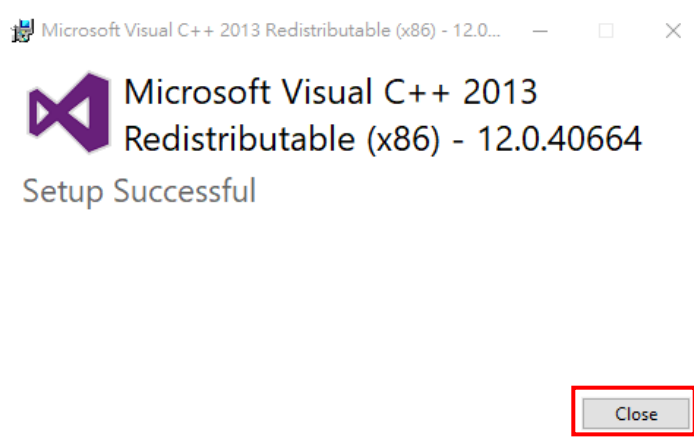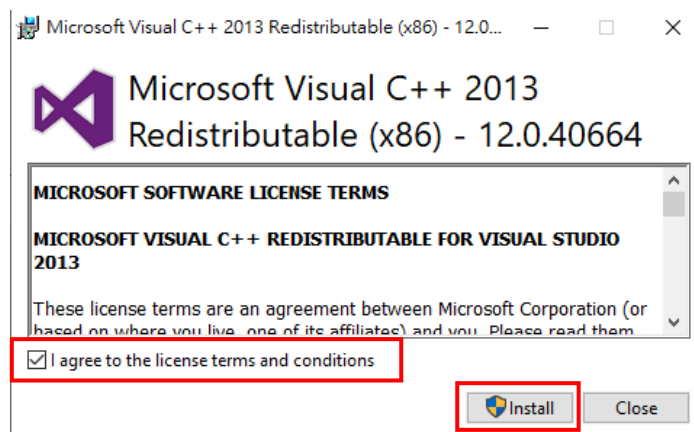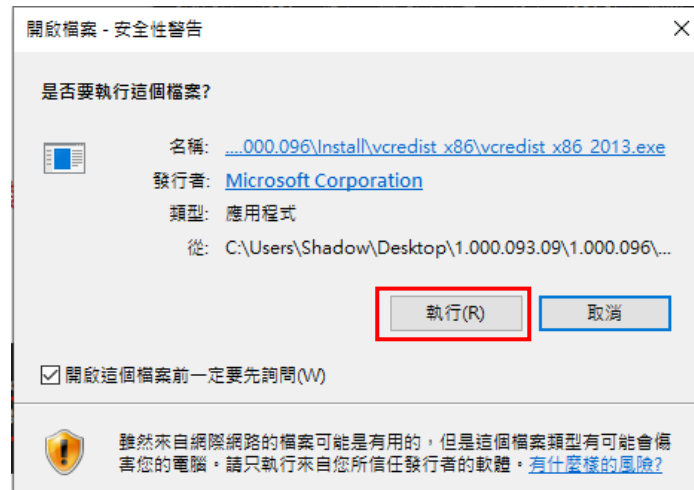


Remarks : If the installation fails, please check whether another version is already installed. If so, please close the message and ignore the failure message.

 To install the UMViewer software, click Application.msi

名稱	修改日期	類型	大小
DotNetFX452	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
Driver	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
vc_redist_x86	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
Application.msi	2025/6/16 下午 03:19	Windows Install...	41,284 KB
setup.exe	2025/6/16 下午 03:19	應用程式	795 KB
VC_redist.x64.exe	2023/6/9 下午 05:08	應用程式	24,762 KB

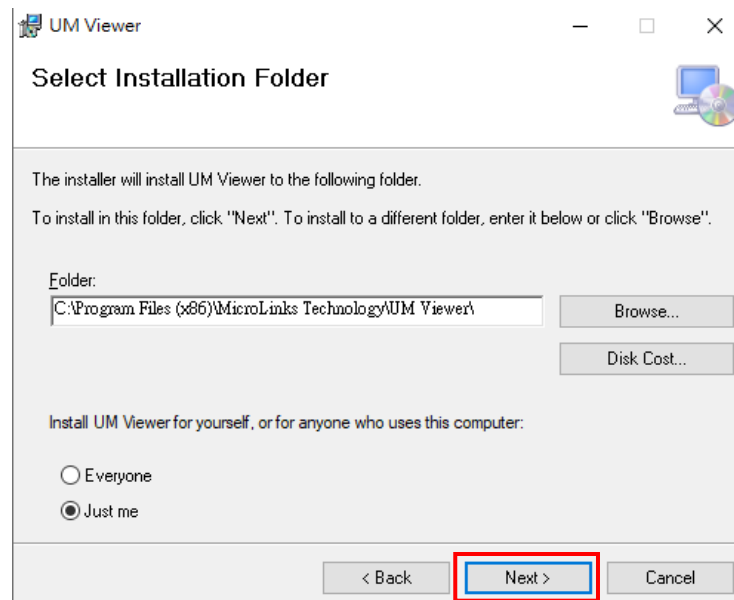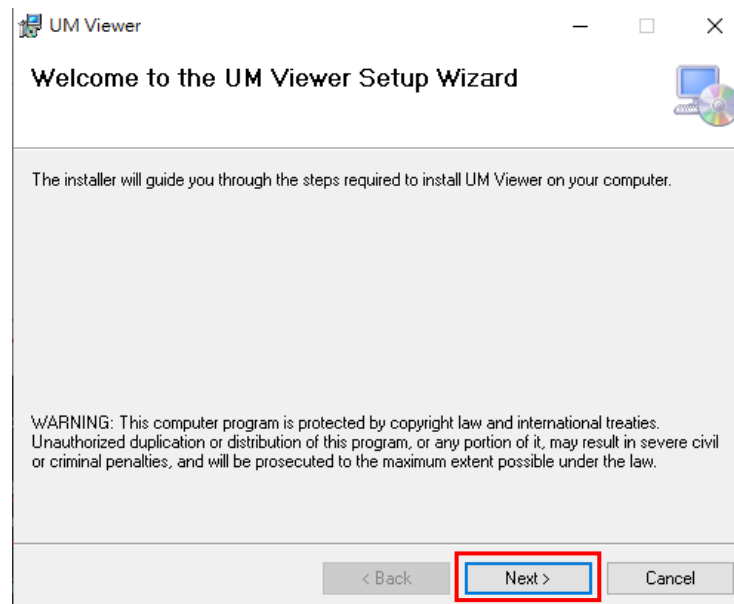

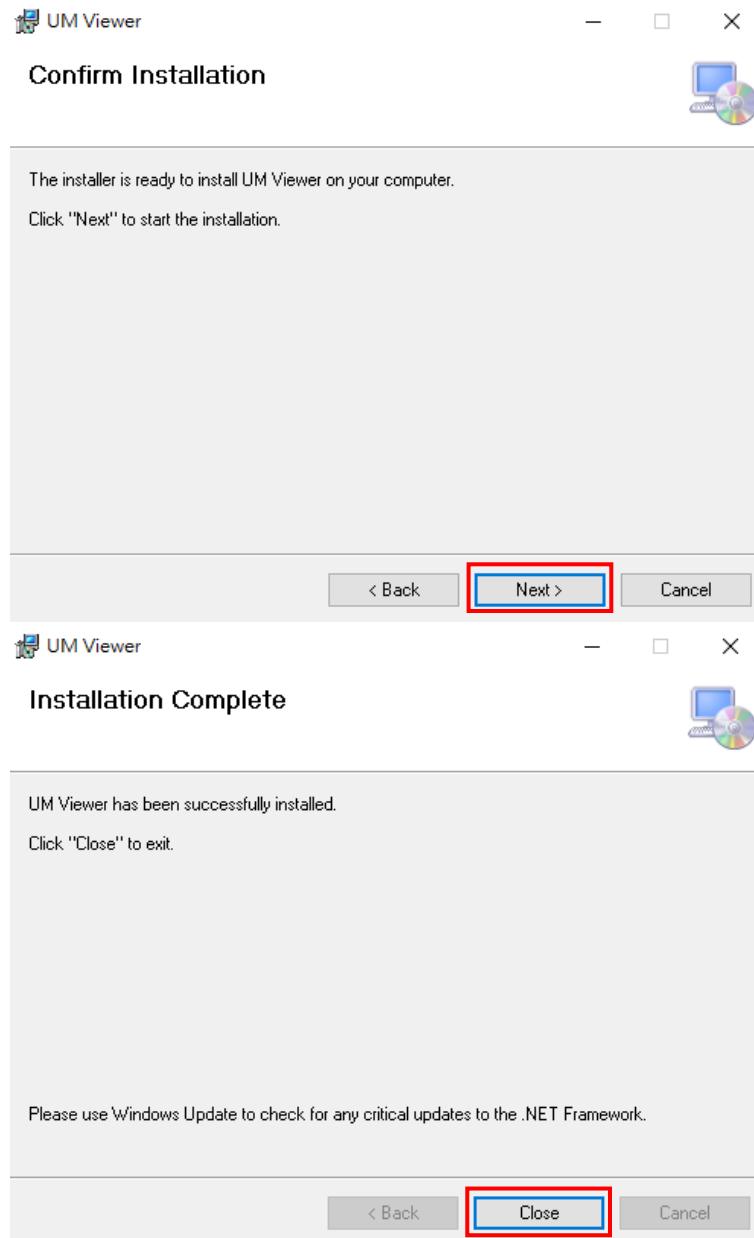


Installation Complete

Final check

Connect the microscope > open Device Manager > under Cameras and (COM & LPT), you will see the camera and its driver.



Open the software  this indicates that the device has been detected and can connect.

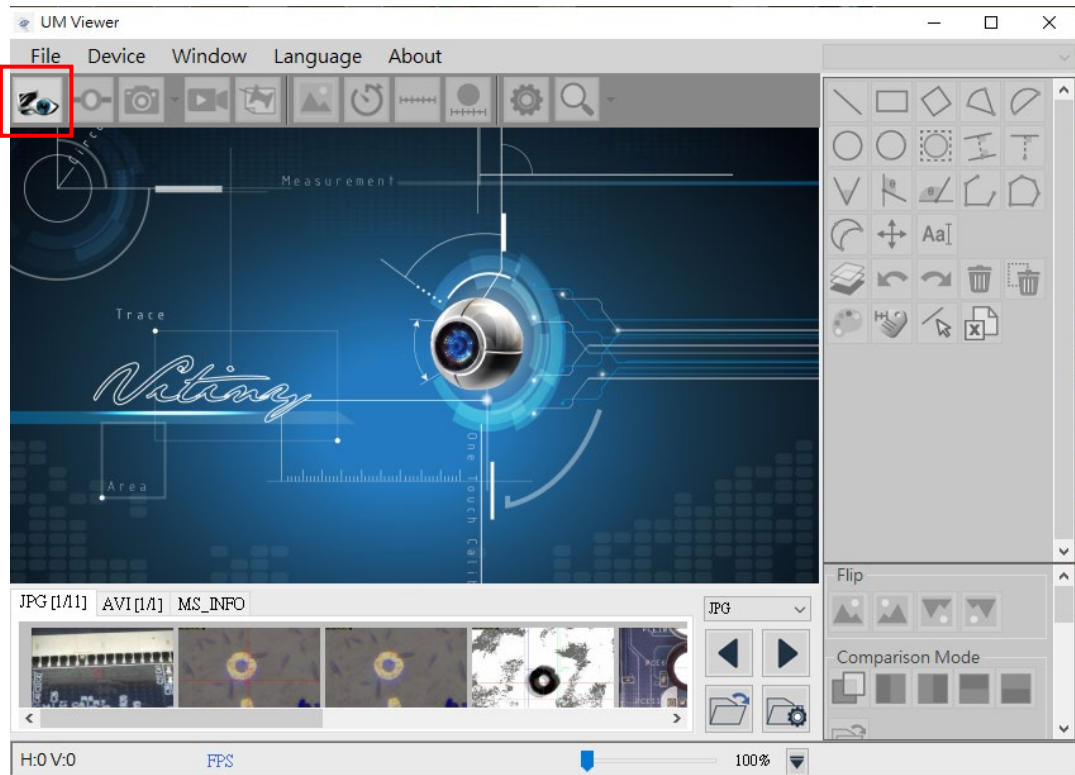

✧ If it is grayed out and cannot connect, click **Device**; the software will perform another search.

