



UMViewer 安裝手冊

自動安裝


選擇 UMViewer_Installer.exe

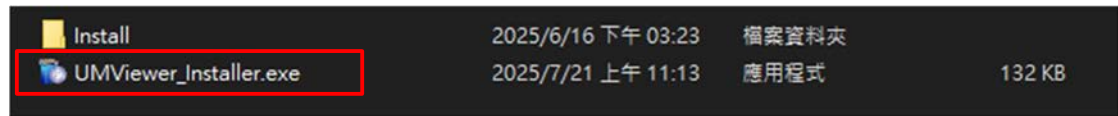

用系統管理員身分執行 UMViewer_Installer.exe

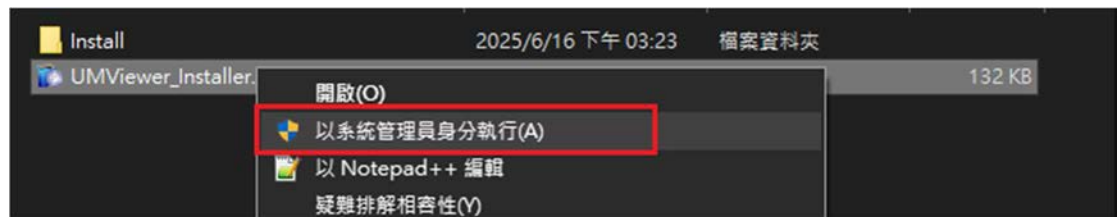



如果沒有使用系統管理權限點選安裝軟體會出現以下訊息。

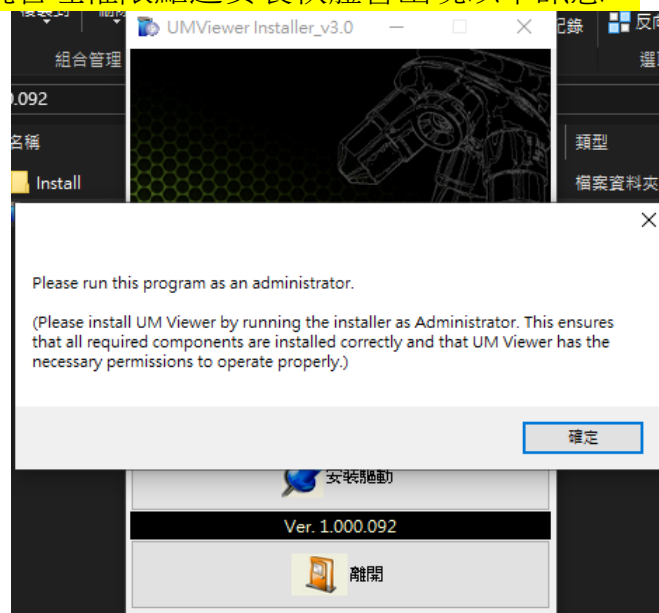

(請以系統管理員身份執行安裝程式來安裝 UM Viewer。這能確保所有必要的組件都已正確安裝，並讓 UM Viewer 擁有正常運作所需的權限。)

A. 點選安裝驅動

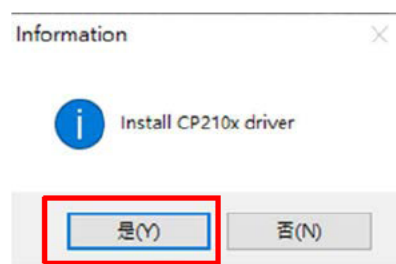

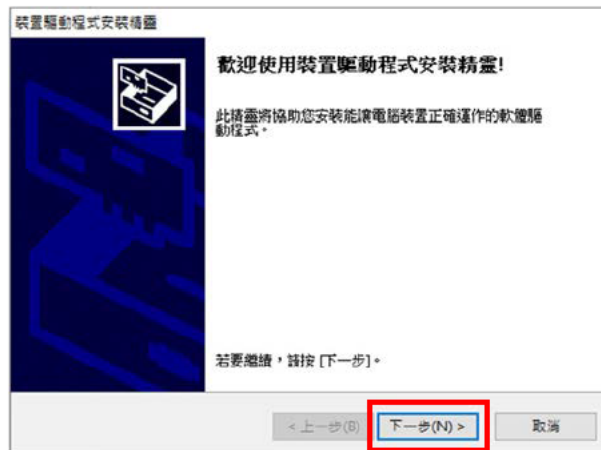

如果安裝失敗表示系統槽被上鎖，請資訊人員開啟後再安裝。


B. 點選安裝軟體






- 自動偵測電腦有沒有必要的微軟可轉發套件，沒有時；會提示安裝：

1. 套件一


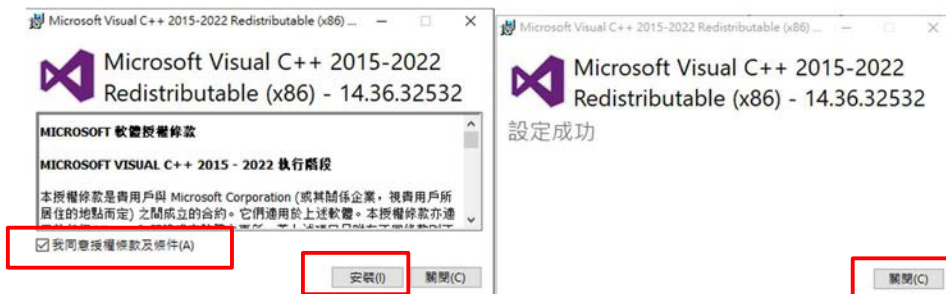



如果出現安裝失敗請確認是否已經安裝其他版本，有就直接忽略失敗訊息

2. 套件二

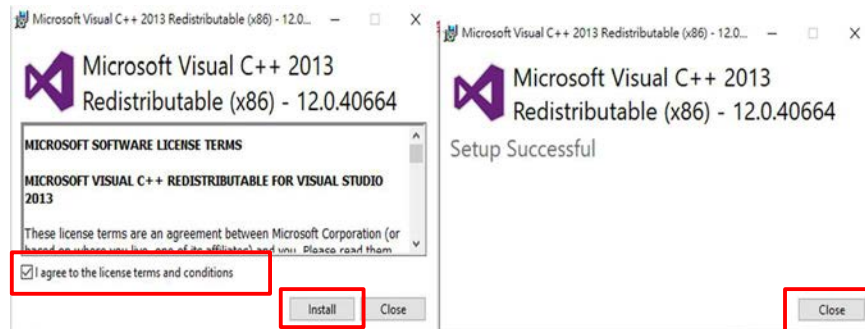

如果出現安裝失敗請確認是否已經安裝其他版本，有就直接忽略失敗訊息

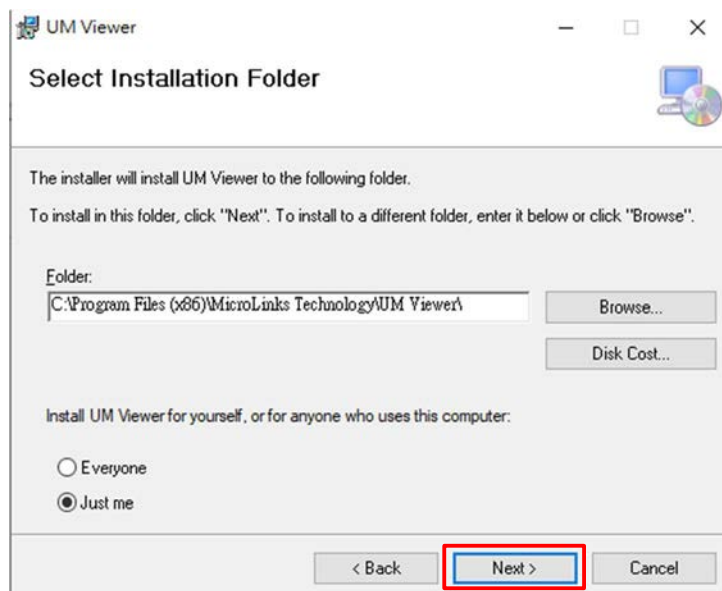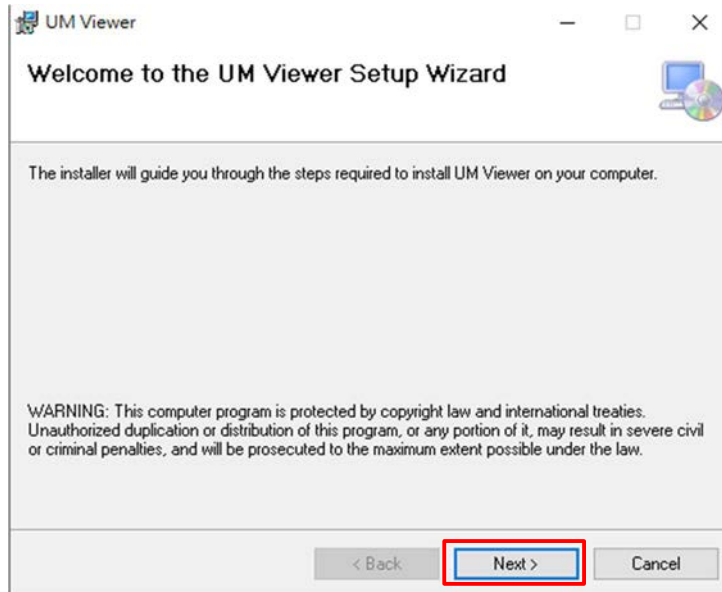

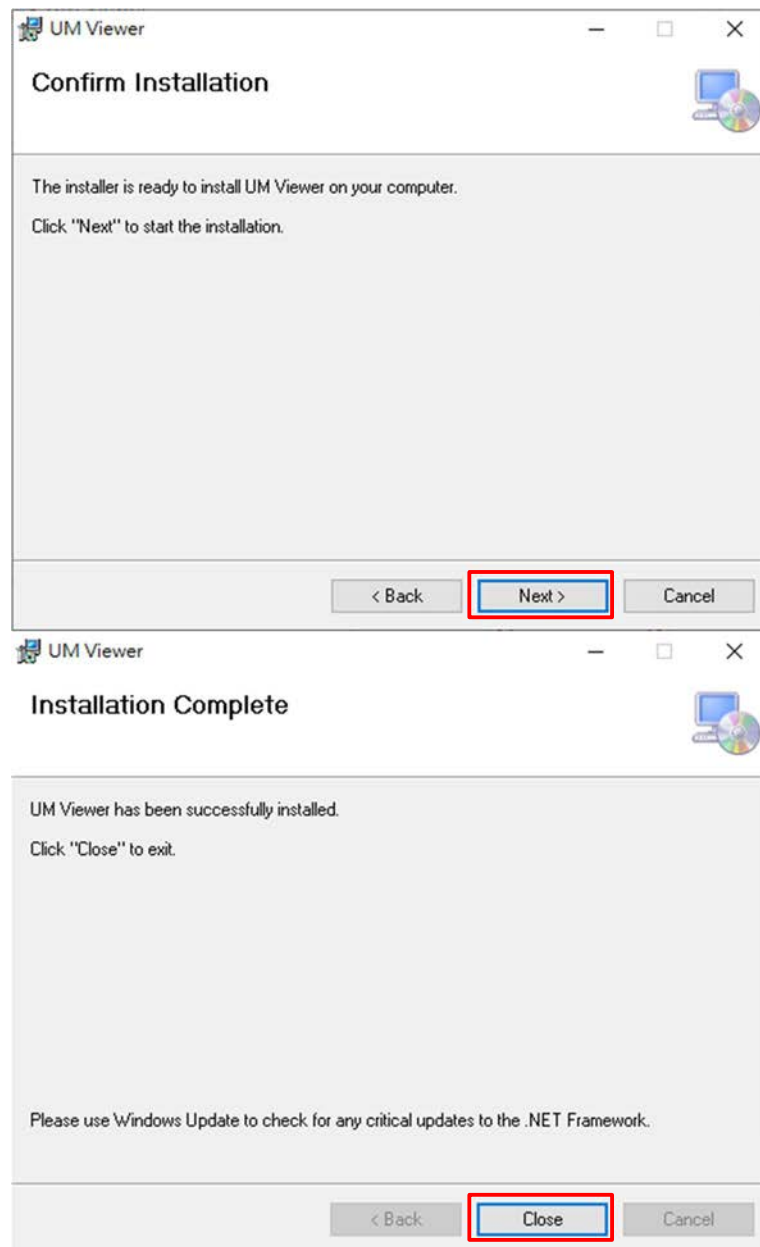

✚ 安裝完成

手動安裝

如果使用自動安裝無法成功請改用手動安裝

➤ 點選 **Install** 資料夾

 Install	2025/6/16 下午 03:23	檔案資料夾	
 UMViewer_Installer.exe	2025/7/21 上午 11:13	應用程式	132 KB

➤ 先安裝驅動程式點選 **Driver** 資料夾

 DotNetFX452	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
 Driver	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
 vc_redist_x86	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
 Application.msi	2025/6/16 下午 03:19	Windows Install...	41,284 KB
 setup.exe	2025/6/16 下午 03:19	應用程式	795 KB
 VC_redist.x64.exe	2023/6/9 下午 05:08	應用程式	24,762 KB

作業系統為 **WIN10、WIN11** 點選  10_

作業系統為 **WIN 7、WIN 8** 等較舊版本點選  _10

名稱	修改日期	類型	大小
 _10	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
 10_	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	

➤ 點選 **CP210x_VCP_Windows**

名稱	修改日期	類型	大小
 CP210x_VCP_Windows	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	

作業系統是 **64 位元** 點選  CP210xVCPInstaller_x64.exe

作業系統是 **32 位元** 點選  CP210xVCPInstaller_x86.exe

 arm	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
 arm64	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
 x64	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
 x86	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
 CP210x_Universal_Windows_Driver.zip	2022/3/23 上午 11:48	WinRAR ZIP 壓縮檔	266 KB
 CP210x_Universal_Windows_Driver_Rel...	2022/3/22 上午 11:37	文字文件	27 KB
 CP210xVCPInstaller_x64.exe	2018/5/7 下午 05:05	應用程式	1,026 KB
 CP210xVCPInstaller_x86.exe	2018/5/7 下午 05:05	應用程式	903 KB
 dpinst.xml	2018/5/7 下午 04:46	Microsoft Edge ...	12 KB
 silabser.cat	2022/3/16 下午 09:20	安全性目錄	14 KB
 silabser.inf	2022/3/16 下午 09:11	安裝資訊	11 KB
 SLAB_License_Agreement_VCP_Windo...	2021/4/16 下午 03:32	文字文件	9 KB




如果安裝失敗表示系統槽被上鎖，請資訊人員開啟後再安裝。

安裝可轉發套件點選 `vcredist_x86`

名稱	修改日期	類型	大小
DotNetFX452	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
Driver	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
vcredist_x86	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
Application.msi	2025/6/16 下午 03:19	Windows Install...	41,284 KB
setup.exe	2025/6/16 下午 03:19	應用程式	795 KB
VC_redist.x64.exe	2023/6/9 下午 05:08	應用程式	24,762 KB


1. 先選擇

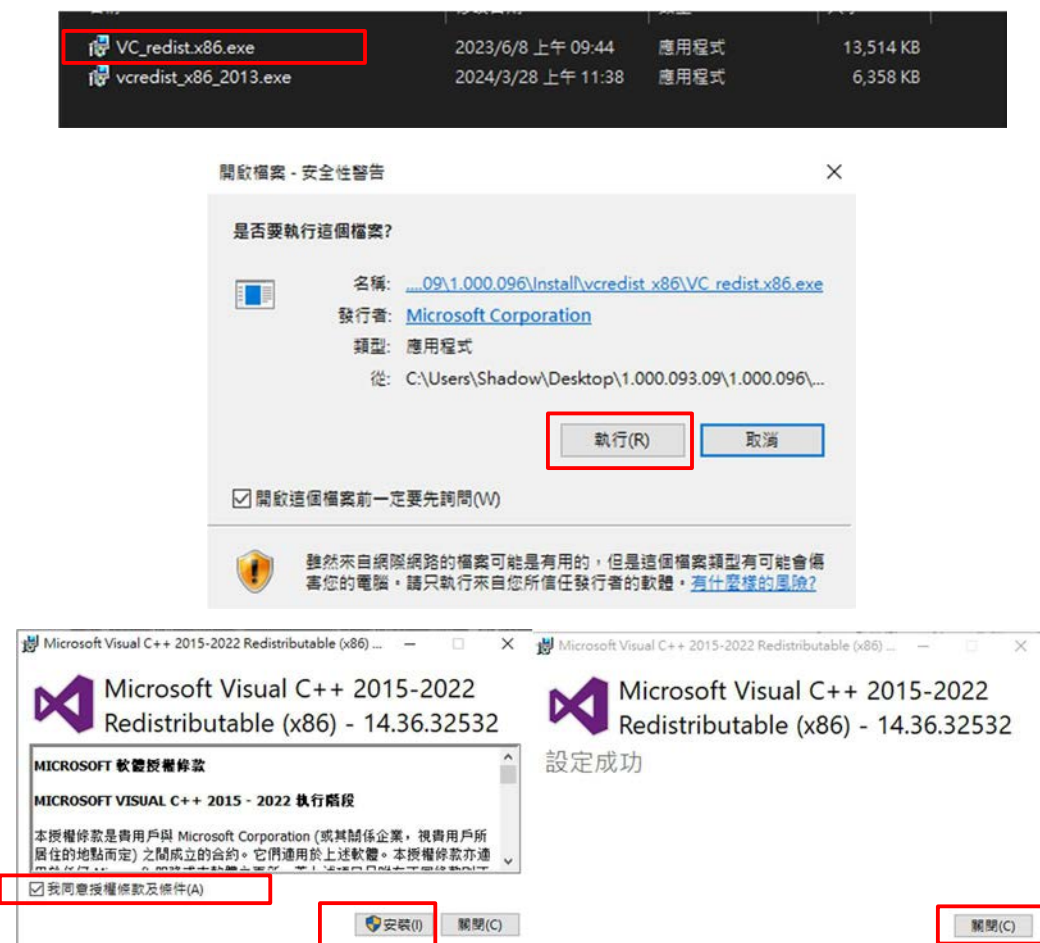

如果出現安裝失敗請確認是否已經安裝其他版本，有就直接忽略失敗訊息



2. 再選擇






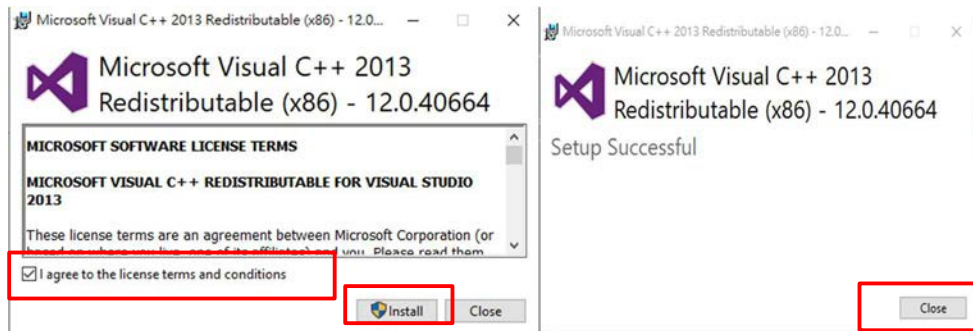

如果出現安裝失敗請確認是否已經安裝其他版本，有就直接忽略失敗訊息

✚ 安裝 UMViewer 軟體點選 Application.msi

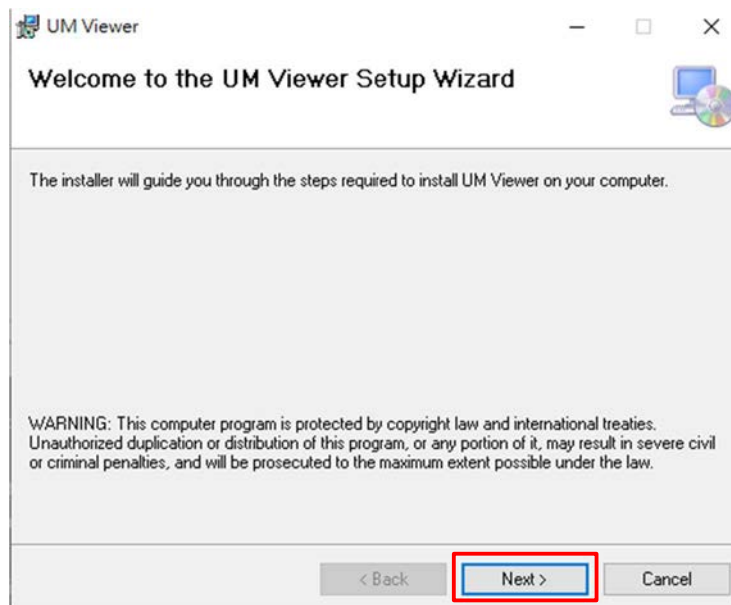
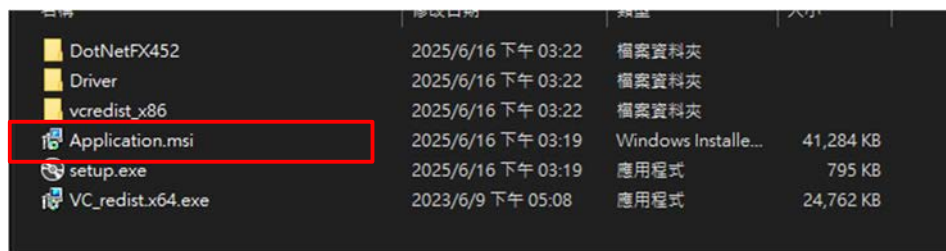


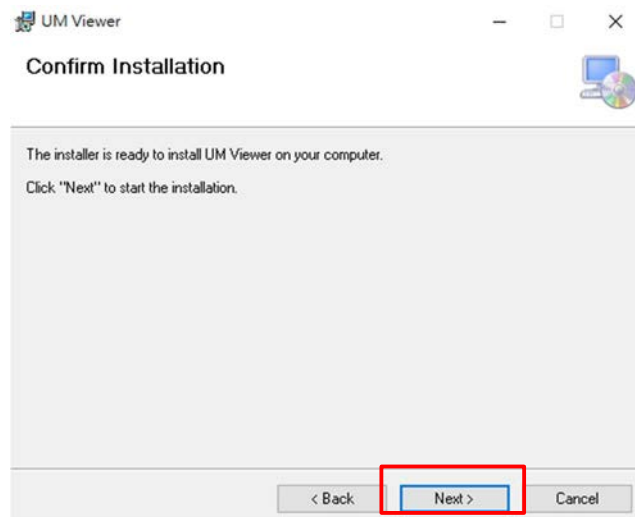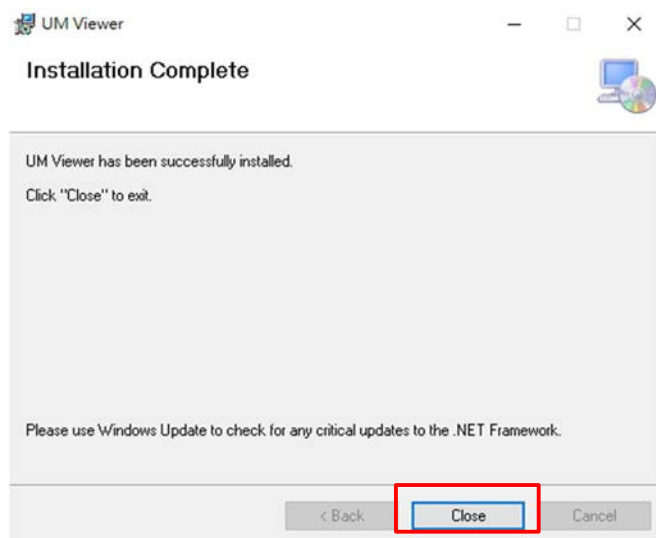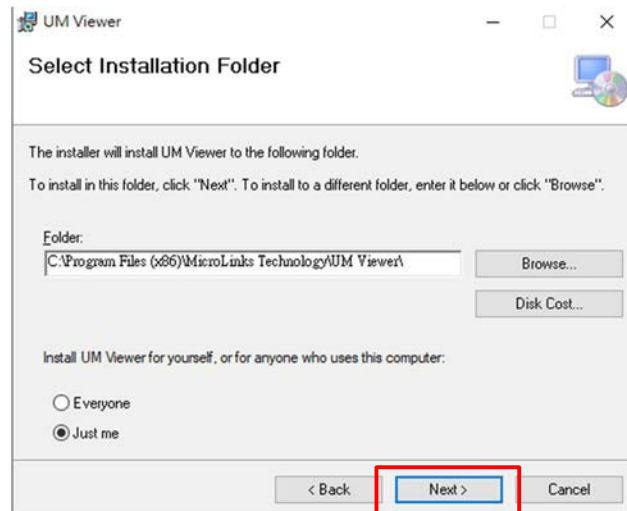


✚ 安裝完成

最終檢查

接上顯微鏡 > 裝置管理員 > 相機、(COM 和 LPT) 就會看到相機和驅動

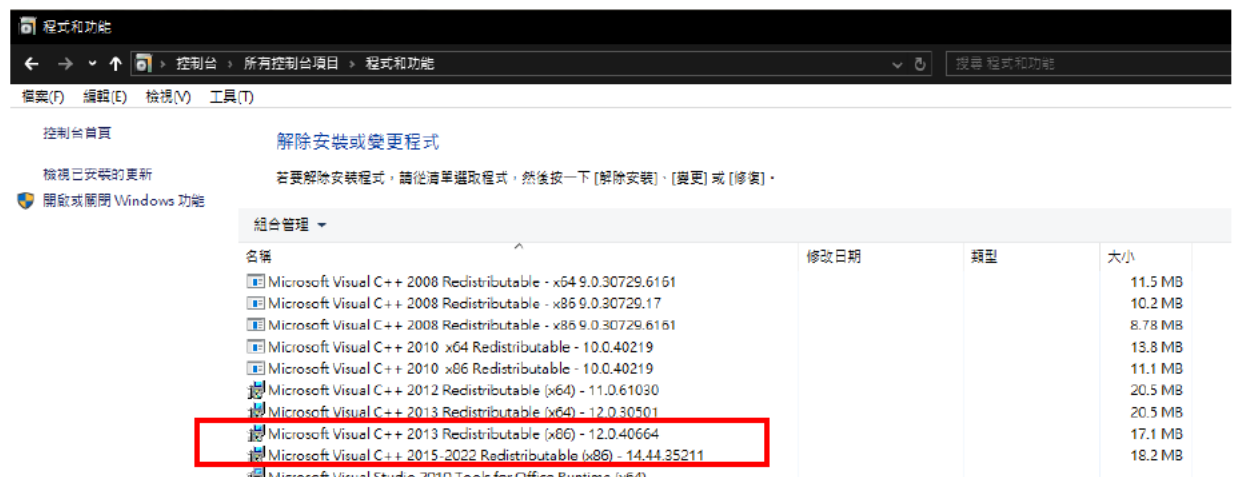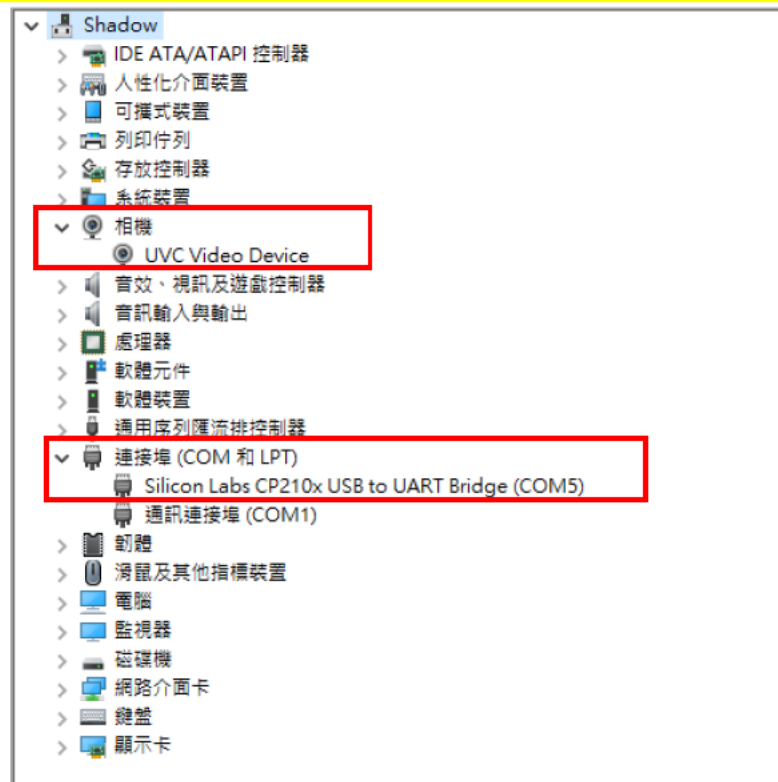

開啟軟體  表示找到設備可以連線

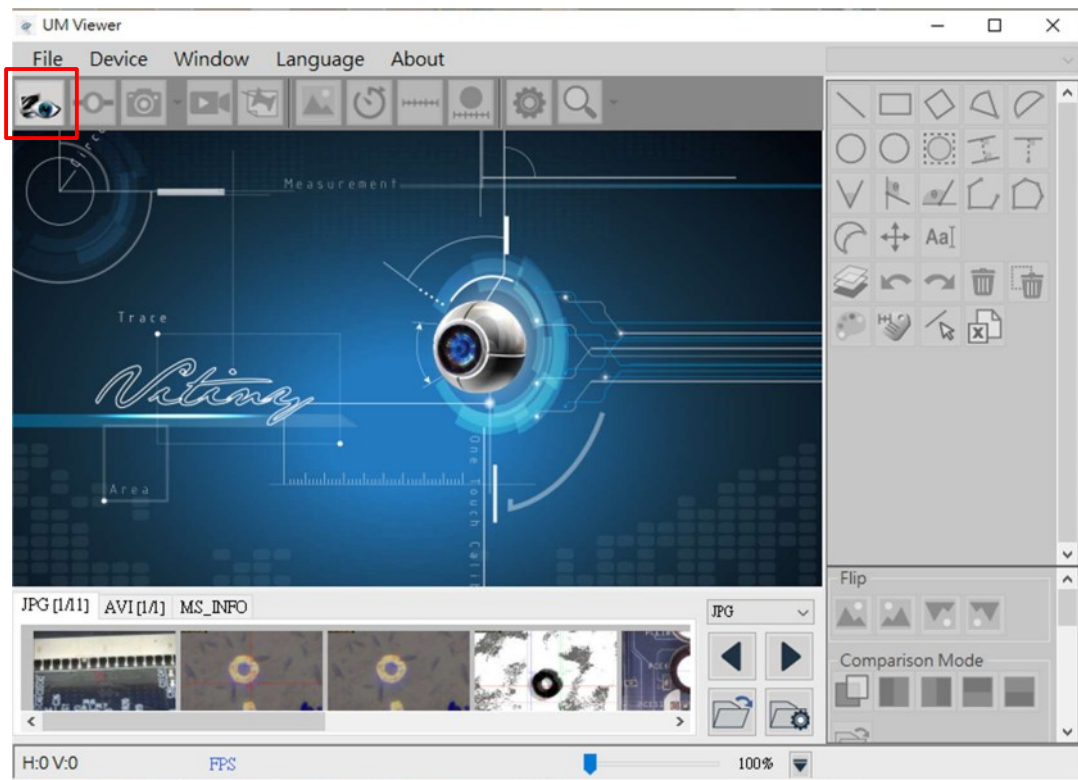

✧ 如果是反灰無法連線請點 **Device**，軟體會再做一次搜尋

